




DSA E-Scan 台式数显糖度仪

美国 EMC 公司成立于 1946 年，作为一家高科技公司，从成立至今，EMC 一直专业从事糖度测试仪的研究开发和制造工作，产品广泛应用于食品、生化、制药等行业。DSA E-Scan 是 EMC 推出的最新台式数显糖度仪，因为采用临界角折射测量技术，它非常适合于各类液体产品如糖浆、果汁、番茄酱、蜂蜜等的浓度测试，测试不受介质颜色、气泡、悬浮杂质、颗粒的影响。

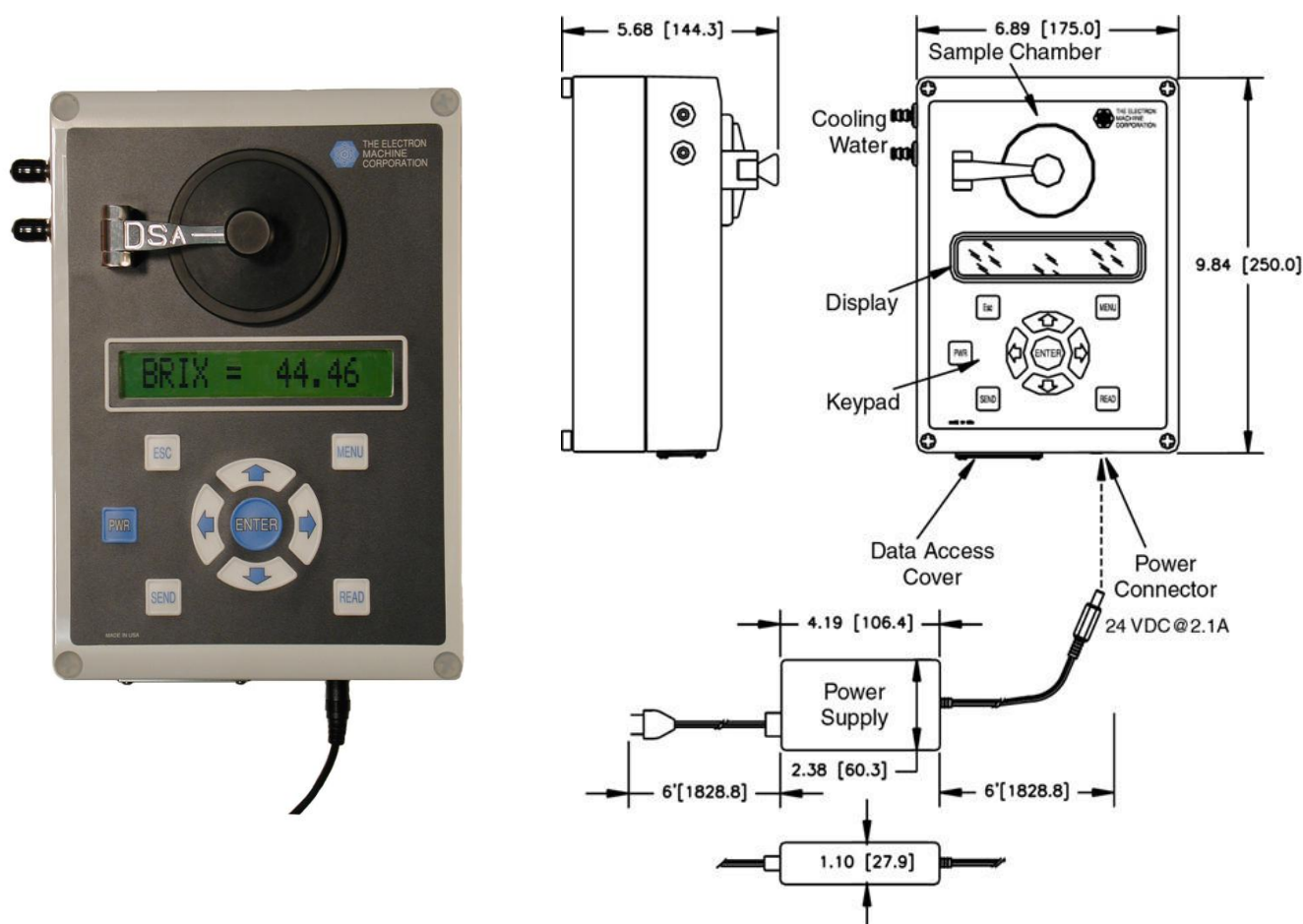

鲜明的优点：

- 1、 高清晰背光数字显示，准确直接；
- 2、 出厂校准和自动温度补偿，测量准确、操作简单；
- 3、 自带恒温水浴接口，可恒温精确测试；
- 4、 3648Pixel 高分辨率 CCD 侦测技术；

江苏纳锦自动化科技有限公司

电话：0512-65238352 传真：0512-68639837

地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1013室

网址：www.jsnakin.com 电子信箱：info@jsnakin.com



- 5、 9 莫氏高硬度大面积蓝宝石棱镜、不锈钢样品槽，经久耐用；
- 6、 小尺寸设计，方便携带和小空间使用；
- 7、 测试不受样品透光性（清澈或混浊）影响；
- 8、 测试精度高达 $\pm 0.03\%$ ；

详细规格：

测量精度	R.I. : ± 0.000075 ，或糖度： ± 0.03 二者中高者
分辨率	R.I. : 0.00001 ，或糖度： 0.01
重复性和灵敏度	0.01%
测试范围	R.I. : $1.32900\text{--}1.54800$ 糖度： $0.00 - 100.00\text{BRIX}$
测试样品温度	$0\text{--}80^{\circ}\text{C}$
环境温度	$0\text{--}50^{\circ}\text{C}$
样品用量	约 1 毫升/次
棱镜/样品槽材质	9 莫氏硬度大面积蓝宝石/316SS 不锈钢
测量值/温度输出	$0\text{--}5\text{V}$ 直流输出
电源	$100/240\text{VAC}$ 、 $50/60\text{HZ}$
重量/尺寸(L*W*H)	$2.27\text{Kg}/250*175*144.3\text{mm}$

江苏纳锦自动化科技有限公司

电话：0512-65238352 传真：0512-68639837

地址：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢1013室

网址：www.jsnakin.com 电子信箱：info@jsnakin.com